

CURRENT SYSTEM DOCUMENTATION

KPTC Scheduler

現行アプリケーション仕様書

社内システム配下のユーザー選択ログイン、確認付きドラッグ移動、内部・外部JSON連携を反映したAs-Is仕様

4 セッション権限	2 分離配布物	3か月 公開データ期間
--------------	------------	----------------

この資料の基準
文書版 v4.0 / 更新日 2026-08-30 / 実装基準コミット 6920f43 / ブランチ main


01 文書の目的・現行版の識別

本資料は、実装済みコードと現在の配布方式を基準に、利用者・管理者・構築担当者が同じ挙動を確認するための仕様書です。

項目	現行値	補足
アプリケーション	KPTC Scheduler	旧Group WatcherをWeb向けに再設計
内部URL	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/schedule/	現行デモ。将来は社内システム内へ配置
外部URL	https://apfelrunner.sakura.ne.jp/GW/calendar/	room=m6 / m7 / m8で対象室を切替
実装基準	6920f43 / main	2026-08-30時点
技術構成	Vite 8 / React 19 / TypeScript / PHP / SQLite	Node.jsは開発・ビルド時のみ
配布物	dist-internal / dist-public	内部用13ファイル、外部用10ファイル
保存方式	内部SQLite + 外部単一JSON	外部側にDBと過去月履歴を置かない

- ログイン画面はパスワード入力を廃止し、有効な管理者・一般ユーザーを選ぶ方式へ変更。
- 社内システム側で本人確認済みであることを前提とし、カレンダー単体では本人性を検証しない。
- ドラッグ移動は専用確認画面を表示し、「移動する」を押すまで予定データを変更しない。
- Mac系ブラウザ向けにポインター操作の補助経路を追加。標準ドラッグと同じ確認処理へ集約。

02 システム全体構成と境界

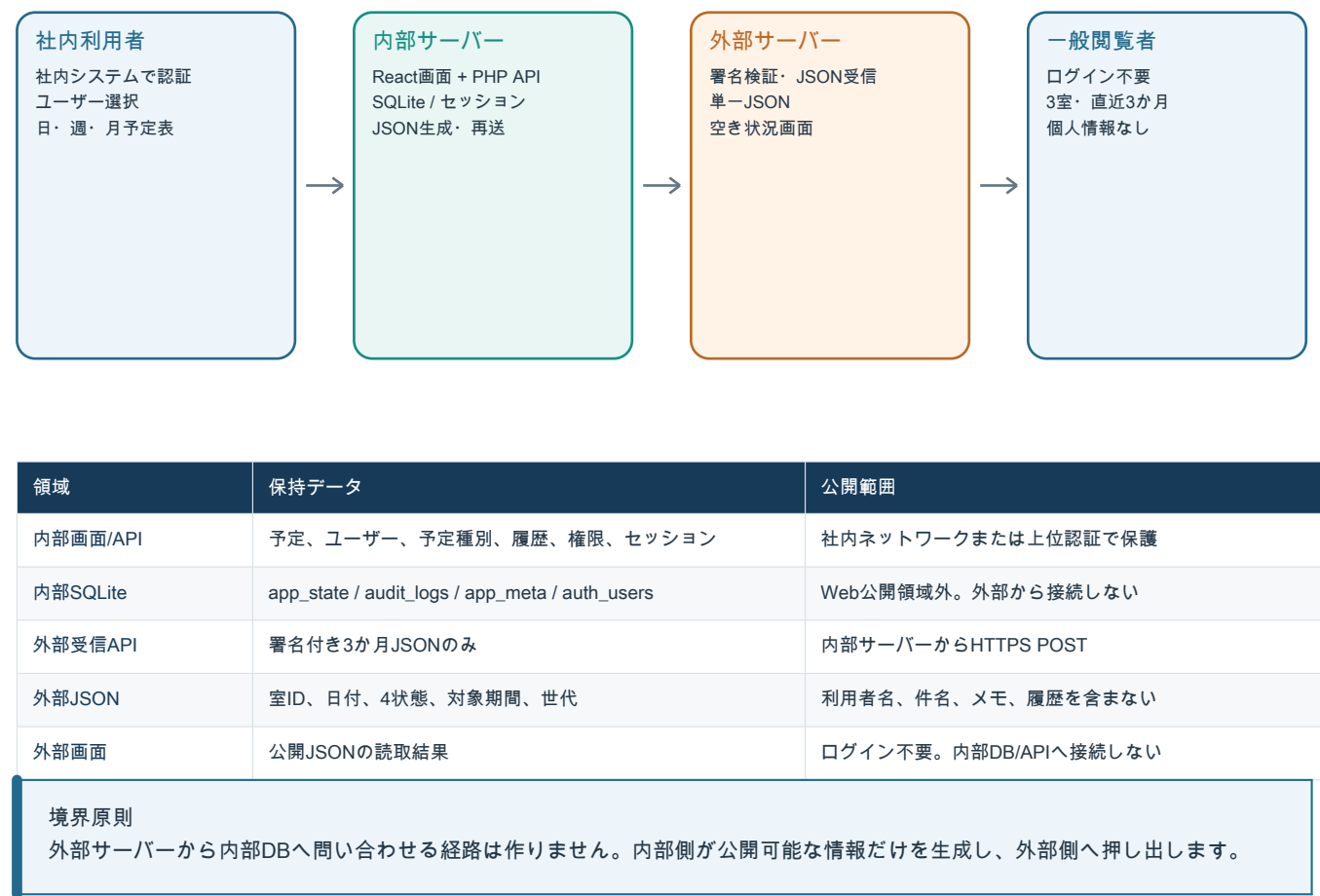

03 ログイン・セッション・権限

権限 / 入口	予定閲覧	予定編集	ユーザー管理	履歴・取消
管理者 admin	可	可	可	可
一般 user	可	可	不可	不可
試験室 room	可	不可	不可	不可
ゲスト guest	可	不可	不可	不可

ログイン画面

- 有効なadmin / userだけを氏名・権限付きプルダウンへ表示し、パスワード欄は表示しない。
- 選択したユーザー名だけをlogin APIへ送信し、サーバー側で有効状態・権限・メンバー紐付けを確認。
- 試験室アカウントは候補へ表示しない。ゲストは専用ボタンから閲覧専用セッションを開始。
- session_regenerate_id、HttpOnly、SameSite=Strict、CSRF、アイドル30分・絶対12時間を維持。
- auth_revisionが変わると既存セッションを無効化。

必須の前提

カレンダー単体では、選択者が本人かを確認しません。管理者も選択できるため、URLへ社内システムを経由せず直接アクセスできないよう、リバースプロキシ、SSO、VPN、社内ネットワーク制限などで必ず保護します。

DB互換

auth_usersのpassword_hash列は旧DBとの互換性のため残していますが、現行ログインでは照合しません。新規アカウントにはランダムな未使用ハッシュを保存します。管理画面とCLIにはパスワード設定機能はありません。

04 画面一覧・ナビゲーション

ID	画面 / セクション	利用者	主な機能
SCR-01	ユーザー選択	未ログイン	管理者・一般の選択、ゲスト入口
SCR-02	スケジュール	全権限	日・週・月、検索、グループ絞込、権限別操作
SCR-03	ユーザー・予定種別	管理者	ユーザー・権限・ID、表示順、予定種別
SCR-04	操作履歴	管理者	変更者、内容、日時、取り消し
SCR-05	電波暗室 空き状況	一般公開	/GW/calendar/?room=m6
SCR-06	G-TEM 空き状況	一般公開	/GW/calendar/?room=m7
SCR-07	パルスサージ 空き状況	一般公開	/GW/calendar/?room=m8

- デスクトップは左ナビゲーションと上部ツールバー。週表示は月曜から日曜の7列。
- 小画面は下部ナビゲーションへ切替え、横幅が足りない予定表は横スクロール。
- 長いユーザー名・試験室名は折り返し、予定ブロックの最小高さは40.5px。
- 試験室空き状況は新しいタブで開き、URLはKPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_PAGE_URLで変更可能。

05 カレンダー表示仕様


機能ID	機能	仕様
CAL-01	初期表示	実行時の現在日を含む週
CAL-02	日表示	選択日をユーザー別に表示。前後は1日
CAL-03	週表示	月曜始まり、月-日の7日。前後は7日
CAL-04	月表示	月曜始まり42セル。1日最大4件と残件数
CAL-05	当日へ戻る	日=今日、週=今週、月=今月
CAL-06	グループ	すべて / 電気通信係 / 試験室
CAL-07	検索	ユーザー名と所属の部分一致
CAL-08	休日	土曜は青系、日曜・2026/2027年の祝日は赤系
CAL-09	複数日	開始日から終了日まで各日に表示
CAL-10	予定カード	時刻、件名、種別色、複数日、メモ、非公開、選択状態

日付処理
日付計算は正午を基準とし、キーはYYYY-MM-DDです。タイムゾーン境界による日付ずれを避けます。

06 予定登録・編集・ドラッグ移動

入力項目	仕様
件名	必須
ユーザー	全登録ユーザー。一般以上は他ユーザー・試験室も変更可能
予定種別	休暇 / 機器点検 / 機器利用 / キャンセル待ち / 所内会議 / 出張 / 外出 / その他
開始日・終了日	終了日は開始日以降。複数日予定に対応
時間帯	時間指定 / 終日 / 午前9:00-12:00 / 午後13:00-17:00
メモ / 非公開	任意。現行の非公開は印のみで、件名・時刻・メモを秘匿しない

ドラッグ移動の確定手順

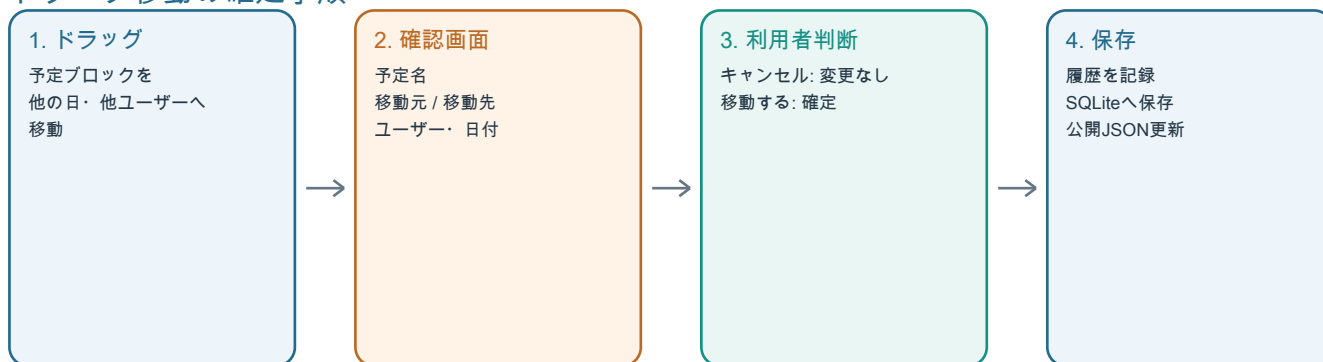

- ・ブラウザ標準confirmは使用せず、Reactの専用モーダルを表示。
- ・通常のHTML5 drag/dropに加え、pointerup時の座標から移動先セルを決める補助経路を実装。
- ・同じユーザー・同じ開始日へのドロップは何もしない。複数日予定は期間の長さを維持。
- ・Shift+クリックで複数選択。コピー・切り取り・貼り付け・削除は複数予定に対応。

07 共有保存・データモデル・操作履歴

テーブル	役割	主な項目
app_state	共有状態をJSON 1行で保存	members / schedules / categories / version
audit_logs	操作履歴と取り消し	actor / action / before_json / after_json / undone
app_meta	移行・公開JSON送信状態	pending / 失敗回数 / 最終成功・失敗
auth_users	ユーザー選択候補と権限	username / member_id / role / enabled / auth_revision

- 画面はSharedState全体を短時間まとめ、version付きで直列保存。
- version不一致はHTTP 409と最新状態を返し、上書き競合を防止。
- 管理者は履歴のbefore_jsonを新versionとして復元でき、取り消し自体も履歴化。
- 公開JSON送信に失敗しても内部予定の保存は確定し、pendingとして再送対象にする。

08 試験室空き状況の生成・表示

内部予定	公開状態	表示
機器点検	maintenance	日付を隠して「-」
9:00-12:00だけ予約	afternoon_available	日付を隠して「▼」= 午後空きあり
13:00-17:00だけ予約	morning_available	日付を隠して「▲」= 午前空きあり
午前・午後とも予約	reserved	記号なし、濃い灰色
該当なし	日別項目なし	日付を表示して予約可

- 対象はm6電波暗室、m7電磁波妨害評価装置(G-TEM)、m8パルスサージシステム。
- 機器利用とキャンセル待ちを予約、機器点検をメンテナンスとして扱う。
- 当月を含む直近3か月のみ生成し、外部側の単一JSONを置換。過去月履歴は残さない。
- 営業日が全て予約または点検なら、月全体へ予約済み(キャンセル待ち)を重ねる。

09 署名付きJSON連携・再送・監視

段階	処理
生成	availability-json.phpが3室・3か月・4状態へ変換
検証	契約ファイルでキー、期間、室ID、状態、sourceVersionを検査
署名	timestamp + 改行 + JSON本文を共有鍵でHMAC-SHA256
送信	HTTPS POST、時刻・署名ヘッダー、リダイレクト追従なし
受信	POST、最大128KiB、時刻差5分、署名、構造、世代を検査
保存	0600の一時ファイルからrenameで単一JSONを原子的置換
再送	5分timer。pending、失敗回数、最終成功を内部DBへ記録
監視	内部monitorの終了コード、外部healthのHTTP 200/503

公開データ最小化
公開JSONはschemaVersion / sourceVersion / updatedAt / rangeStart / rangeEnd / availabilityだけです。氏名・予定件名・メモ・履歴は含みません。


10 API・CLI・環境設定

入口	権限	用途
api.php?action=bootstrap	セッション任意	未ログイン時は候補、ログイン時は状態・CSRF
api.php?action=login	POST	ユーザー名だけで選択セッション開始
guest-login / logout	POST	ゲスト開始 / セッション破棄
member-account	管理者 + CSRF	ユーザー・ID・権限の保存・削除
save	管理者/一般 + CSRF	予定等のversion付き保存
undo	管理者 + CSRF	操作取り消し
receive / public / health	HMAC / 不要	外部受信・公開読取・鮮度確認
publish / monitor CLI	CLI	再送と監視
manage-auth-user CLI	CLI	初期アカウント、一覧、有効化、無効化

主要環境設定

設定	用途
KPTC_INTERNAL_SCHEDULER_DB	内部SQLite絶対パス
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_ENDPOINT / PAGE_URL	外部受信URL / 公開画面URL
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_SECRET	内部・外部で共有する32文字以上の秘密
KPTC_PUBLIC_AVAILABILITY_JSON	外部単一JSON絶対パス
KPTC_AUTH_IDLE_TIMEOUT / ABSOLUTE_TIMEOUT	セッション期限

11 ビルド・配布・配置

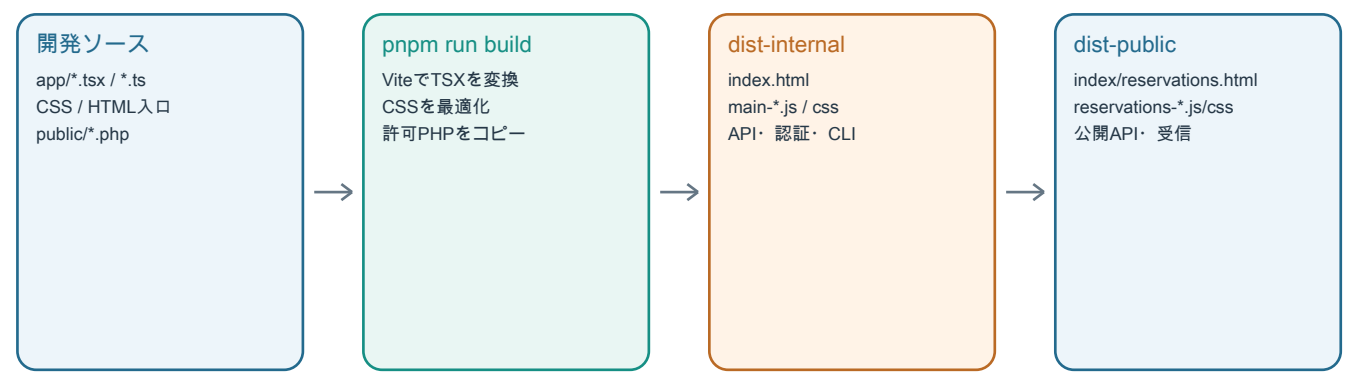

用途	さくら配置	独立Linux推奨配置
内部Web	/home/apfelrunner/www/GW/schedule/	/opt/kptc-scheduler/internal/current/
外部Web	/home/apfelrunner/www/GW/calendar/	/opt/kptc-scheduler/public/current/
内部DB	/home/apfelrunner/GW/group-watcher.sqlite	/var/lib/kptc-scheduler/group-watcher.sqlite
公開JSON	/home/apfelrunner/GW-public/	/var/lib/kptc-availability/public-availability.json
設定	/home/apfelrunner/GW/config/*.php	/etc/kptc-*/ 配下、権限600

12 非機能・受入基準・変更履歴

分類	現行対策	注意点
認証境界	上位社内認証 + 選択セッション	直接URL遮断が必須
認可	APIでadmin/user/room/guest判定	画面非表示だけに依存しない
更新	CSRF、POST、version、SQLite取引	競合時は再操作
公開連携	HMAC、時刻差、サイズ、世代、原子的置換	共有鍵管理が必要
可用性	再送、内部monitor、外部health	オフライン編集の後送なし
祝日	2026年・2027年を静的定義	2028年以降は更新

受入確認

- pnpm run check / pnpm test / pnpm run buildが成功。
- PHP構文検査、内部API、外部health、JSON送受信を確認。
- ユーザー選択、ゲスト、権限拒否、セッション期限を確認。
- 日・週・月表示と、ドラッグ後の専用確認画面を実ブラウザで確認。

改訂履歴

版	日付	主な内容
v3.0	2026-08-16	パスワード認証、4権限、署名JSON、2配布物
v4.0	2026-08-30	上位認証前提のユーザー選択、パスワード廃止、確認付きドラッグ、Mac向け補助、ビルド後関係明確化